



PWBH54/TD/G/FR



PWBH27/TD/G/FR



Bains-marie non Agités Prime

Les Prime WBH sont la marque phare des bains-marie Genlab. Ils sont construits au plus haut standards et regorgent de fonctionnalités et d'améliorations.

Il dispose de notre dernier système de contrôle à écran tactile qui offre un contrôle intuitif conçu pour utilisation en laboratoire. Avec une résolution de 0,1°C, tendances à l'écran, contrôle de profil et enregistrement de données minuterie intégrales, cette gamme de bains-marie contribue à maximiser la productivité.

Fonctionnalités

- 5 tailles (8 à 54 litres)
- Plage de température: 25,0°C à 80,0°C (sans couvercle)
- Plage de température: 25,0°C à 100,0°C (avec couvercle)
- 3 modes de minuterie, compte à rebours, ou profil 8 étapes ou mode horloge temps réel
- Chambre en acier inoxydable
- Contrôle d'interface PID à écran tactile de 3,2 pouces
- Tendances historiques à l'écran (48 heures)
- Contrôle de surchauffe à réinitialisation manuelle ou automatique
- Capteurs duplex PT100B de haute précision <0,8°C
- Résolution 0,1°C
- Efficacité énergétique avec compteur d'énergie intégré
- Nouveau - fonction de verrouillage du point de consigne
- Langues IHM sélectionnables

Options

- Enregistreur de température intégré avec micrologiciel de rapport
- 10 menus x 8 profils d'étapes (et contrôle cyclique)
- Couvercles plats en acier inoxydable
- Couvercles à pignon
- Alarmes d'avertissement Audible
- Corps extérieur en acier inoxydable
- Étalonnage traçable aux normes nationales
- Vanne de vidange et robinet
- Garantie prolongée



Conception


L'extérieur est construit en tôle d'acier et fini dans une peinture en poudre facile à nettoyer. Il est équipé d'un bain intérieur en acier qui permettra de remplir jusqu'à 90% du volume total. Chaque bain est fourni avec un plateau de base en acier inoxydable. Le chauffage est appliqué à la base du bain, ce qui améliore l'uniformité de la température et optimise l'espace interne.

Chauffage

Chauffé par des tapis chauffants en silicone avec arrêt de sécurité intégré en cas de détection de conditions d'ébullition à sec. Veuillez noter ces Les bains ne sont pas conçus pour faire bouillir à sec, assurez-vous donc toujours qu'il y a de l'eau dans le bain avant de l'allumer.

Contrôles

Le système de contrôle comprend un utilisateur à écran tactile sur mesure interface, qui offre à la fois un contrôle précis de la température et une système de surchauffe intégré en utilisant 2 capteurs PT100 individuels. Les fonctionnalités avancées peuvent être activées et désactivées en fonction du sur-mesure applications de chauffage et adaptées aux préférences du client. La tendance de la température est affichée jusqu'à 48 heures et des mises à niveau optionnelles sont disponibles pour les sorties d'alarme.

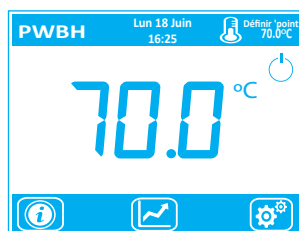

Tailles et Spécifications

Référence Genlab	Capacité (environ litres)	Dimensions internes (Profondeur x L x L cm)	Dimensions extérieures (Hauteur x L x L cm)	Étagères	Puissance	Tension	Poids (kg)
PWBH8/TDIG/FR	8.1	20* x 30 x 15	27 x 33 x 29**	1	400	230	8
PWBH13/TDIG/FR	12.5	15* x 30 x 32	22 x 33 x 47**	1	800	230	10
PWBH18/TDIG/FR	17.3	20* x 30 x 32	27 x 33 x 47**	1	800	230	11
PWBH27/TDIG/FR	27.0	20* x 30 x 50	27 x 33 x 65**	1	1200	230	16
PWBH54/TDIG/FR	53.8	20* x 49 x 61	28 x 66 x 65**	1	2400	230	26

* La profondeur interne est la profondeur totale du réservoir. Nous vous recommandons de laisser au moins 2cm du haut du réservoir et l'étagère mesure 2cm de haut donc hauteur utilisable pour le plein la submersion est inférieure de 4cm aux chiffres indiqués.

** Prévoyez 8cm supplémentaires sur la longueur externe pour le cordon d'alimentation lors du calcul de l'espace de la pailasse. L'ajout d'une vanne de vidange et d'un robinet dans les options augmentera globalement hauteur de 5cm.

Commande

Toutes les unités ont un extérieur en acier doux enduit de poudre avec de l'acier inoxydable disponible en option. Toutes les unités sont livrées entièrement isolé avec une baignoire intérieure en acier inoxydable. Les couvercles doivent être commandés séparément en option. Où sont les options requis, ajoutez simplement le code d'option à la référence d'origine. Par exemple **PWBH13/TDIG/FR** avec extérieur en acier inoxydable et le couvercle à pignon devient **PWBH13/TDIG/FR/SSE/GL**. Contactez le service commercial pour des options sur mesure.

Codes d'option

- FL** Couvercle plat en acier inoxydable
- GL** Couvercle à pignon
- AWA** Avertissement sonore
- SSE** Corps en acier inoxydable
- DVT** Drain valve and tap
- SPC** Étalonnage traçable
- X1** Garantie prolongée
- 10PRO** 10 menu x 8 profil (inc cyclique)
- ITL** Enregistreur de température intégré



Livré sans couvercle

Livré avec au couvercle

Livré avec couvercle à pignon