



HAS/100/TD/G/FR



HAS/500/TD/G/FR

Stérilisateurs à Air Chaud

La stérilisation à l'air chaud est une méthode pour tuer efficacement les microbes de toutes sortes, en particulier les bactéries, virus et moisissures sur des matériaux résistants à la chaleur. Les fours stérilisateurs à air chaud de Genlab sont utilisés dans de nombreux hôpitaux, laboratoires, cliniques vétérinaires et médicales pour stériliser chirurgical et cosmétique instruments, verres et boîtes de Pétri. Il dispose de notre dernier système de contrôle à écran tactile, qui offre un contrôle intuitif et une excellente précision et dispose d'un système de minuterie interactif. Cela garantit que le compte à rebours ne démarre pas tant que le point de consigne n'est pas atteint et s'arrête si la température de la chambre tombe en dessous du point de consigne. Cela garantit que le temps de stérilisation est garanti à tout moment, indépendamment de la charge de stérilisation et du volume de la chambre. Température optionnelle enregistrement désormais disponible sur la gamme HAS.

Fonctionnalités

- 4 tailles (50 à 1000 litres)
- Indication sonore / visuelle de «fin de cycle»
- Plage de température 40°C à 250°C (50 à 250 ° C au-dessus des modèles 250L)
- Tendances historiques à l'écran (48 heures)
- Compte à rebours interactif
- Réinitialisation manuelle ou automatique de la surchauffe
- Capteurs duplex PT100B de haute précision <0,8°C
- Circulation assistée par ventilateur
- Corps enduit de poudre facile à nettoyer
- Chambre en acier inoxydable
- Excellente stabilité <0,8°C
- Faible uniformité de la chambre
- Valve réglable pour la régulation de l'air d'échappement
- Efficacité énergétique avec compteur d'énergie intégré
- Nouveau - fonction de verrouillage du point de consigne
- Langues IHM sélectionnables

Options

- Enregistreur de température intégré avec micrologiciel de rapport
- 10 menus x 8 profils d'étapes (et contrôle cyclique)
- Ports d'accès (25, 50, 75 ou 100mm)
- Verrouillage mécanique de la porte (fourni avec 2 clés)
- Entrée d'air filtré
- Étalonnage traçable aux normes nationales
- Supports et kits d'empilage sur mesure
- Unité d'extraction
- Garantie prolongée
- Solutions sur mesure disponibles sur demande
- Roues pivotantes (uniquement disponibles sur les modèles 250 / 350, - monté de série sur les modèles 425/500/650/750/850 et 1000)



Conception


L'extérieur est construit en tôle d'acier et fini dans une peinture en poudre facile à nettoyer. La chambre intérieure est fabriquée en acier inoxydable 304 et fournie avec des étagères métalliques amovibles chromées pour une bonne circulation de l'air. Des filtres d'entrée optionnels sont disponibles pour empêcher les petites particules de poussière de pénétrer dans la chambre. Veuillez noter que cela ajoute 50 mm de largeur aux dimensions extérieures ci-dessous.

Chauffage

Chauffé par des éléments gainés Incoloy positionnés dans le conduit de ventilation latéral pour toutes les unités.

Contrôles

Le système de contrôle comprend un utilisateur à écran tactile sur mesure interface qui offre à la fois un contrôle précis de la température et un système de surchauffe intégré en utilisant 2 capteurs PT100 individuels. Les fonctionnalités avancées peuvent être activées et désactivées en fonction du sur-mesure applications de chauffage et adaptées aux préférences du client. Les tendances du four sont affichées pendant jusqu'à 48 heures et la stérilisation les séquences peuvent être lancées d'une simple pression sur un bouton.

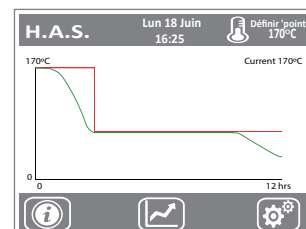

Tailles et Spécifications

Référence Genlab Nombre	Capacité (litres)	Gradations internes (H x L x P cm)	Dims externes (H x L x P cm)	Étagères / Position	Puissance	Tension	Poids (kg)
HAS/50/TDIG/FR/SS	50	45 x 32 x 35	58 x 68 x 50	2..3	750	230	35
HAS/75/TDIG/FR/SS	75	45 x 49 x 35	58 x 85 x 50	2..3	1000	230	45
HAS/100/TDIG/FR/SS	100	45 x 49 x 46	58 x 85 x 61	3..4	1000	230	55
HAS/125/TDIG/FR/SS	125	55 x 49 x 46	66 x 85 x 61	3..5	1500	230	65
HAS/150/TDIG/FR/SS	145	55 x 49 x 54	66 x 85 x 69	3..5	1500	230	70
HAS/200/TDIG/FR/SS	200	75 x 49 x 54	86 x 85 x 69	4..7	2000	230	85
HAS/250/TDIG/FR/SS	240	91 x 51 x 52	117 x 94 x 69	5..7	2000	230	90
HAS/350/TDIG/FR/SS	345	91 x 61 x 62	117 x 108 x 79	5..7	2500	230	120
HAS/425/TDIG/FR/SS	425	91 x 61 x 77	117 x 110 x 95	5..7	3000	230	150
HAS/500/TDIG/FR/SS	535	114 x 61 x 77	140 x 110 x 95	5..9	3000	230	165
HAS/650/TDIG/FR/SS	675	114 x 77 x 77	140 x 142 x 95	5..9	6000	415	280
HAS/750/TDIG/FR/SS	760	128 x 77 x 77	164 x 142 x 95	5..10	6000	415	300
HAS/850/TDIG/FR/SS	840	142 x 77 x 77	178 x 142 x 95	5..11	6000	415	320
HAS/1000/TDIG/FR/SS	1005	142 x 77 x 92	178 x 142 x 110	5..11	6000	415	340

Commande

Toutes les unités ont un intérieur en acier inoxydable avec une interface à écran tactile et une minuterie interactive en standard. Où les options sont obligatoires, ajoutez simplement le code d'option à la référence d'origine. Par exemple **HAS/1000/TDIG/FR** avec CAL cert et serrure de porte devient **HAS/1000/TDIG/FR/SPC/DL**. Contactez le service commercial pour des options sur mesure.

Codes d'option

AP	Ports d'accès	DL	Verrou	FIL	Entrée d'air filtré
SPC	Étalonnage en un seul point	3PC	Étalonnage en 3 points	10PRO	10 menu x 8 profil (inc cyclique)
X1	Garantie prolongée	EXT	Systèmes d'extraction	1108	Roues pivotantes
STAND	Supports	STACK	Kits d'empilage	ITL	(unités 250-350L uniquement)
					Enregistreur de temp intégré