



Fours / Incubateurs de Paillasse à Double Usage

La gamme Genlab de fours / incubateurs à double usage combine l'avantage de deux plages de température dans la même unité. Utilisation d'un micrologiciel sur mesure spécialement conçu pour cela la taille de la chambre et un capteur de température de classe d'étalonnage, nous pouvons offrir un contrôle précis à 250,0°C sans dépassement de température. La même chambre peut également maintenir un 30,0°C* température constante en ajustant simplement le point de consigne. Disponible dans une variété de tailles et conçu avec des écrans montés sur le côté ou sur la base pour répondre exactement à vos besoins.

Fonctionnalités

- 10 tailles de 6 à 200 litres (conception de contrôleur de base)
- 6 tailles de 50 à 200 litres (conception de contrôleur à montage latéral)
- Plage de température* (ambiante + 8°C) à 250,0°C
- Résolution 0,1°C
- Tendances historiques à l'écran (48 heures)
- Réinitialisation manuelle ou automatique de la surchauffe
- Capteurs duplex PT100A haute précision <0,6°C
- Excellente stabilité <+/- 0,6°C (ventilé)
- Faible uniformité de la chambre
- Efficacité énergétique avec compteur d'énergie intégré
- Nouveau - fonction de verrouillage du point de consigne
- Langues IHM sélectionnables



Options

- Circulation assistée par ventilateur (non disponible <30L)
- Chambre en acier inoxydable
- Contrôle de profil en 8 étapes
- Compte à rebours
- Fonctionnement de l'horloge en temps réel 24h/24 et 7j/7
- Ports d'accès (25, 50, 75 ou 100mm)
- Avertissements sonores
- Étalonnage traçable aux normes nationales
- Supports et kits d'empilage sur mesure
- Unité d'extraction
- Garantie prolongée
- Panneaux antidéflagrants (style DP uniquement)
- Solutions sur mesure disponibles sur demande
- 10 menus x 8 profils d'étapes (et contrôle cyclique)

Conception


L'extérieur est construit en tôle d'acier et fini dans une peinture en poudre facile à nettoyer. La chambre intérieure est en acier doux revêtu d'aluminium (CLAD), avec une chambre en acier inoxydable disponible en option. Elles sont équipées de glissières fixes et d'étagères grillagées amovibles chromées.

Chauffage

Chauffé par des éléments gainés Incoloy positionnés dans la base du four sur toutes les cuisinières à convection naturelle. Les cuisinières assistées par ventilateur ont des éléments à l'arrière sur les modèles de montage de base et sur le côté sur les conceptions de montage latéral.

Contrôles

Le système de contrôle comprend un utilisateur à écran tactile sur mesure interface qui offre à la fois un contrôle précis de la température et un système de surchauffe intégré en utilisant 2 capteurs PT100 individuels. Les fonctionnalités avancées peuvent être activées et désactivées en fonction du sur-mesure applications de chauffage et adaptées aux préférences du client. Les tendances du four sont affichées pendant jusqu'à 48 heures et en option des mises à niveau sont disponibles pour les sorties d'alarme.

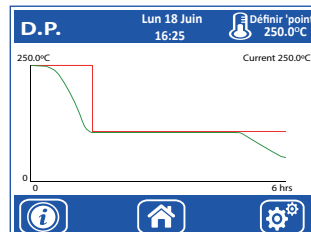

Tailles et Spécifications

Référence Genlab Nombre	Capacité* (litres)	Gradations internes (H x L x P cm)	Dims externes (H x L x P cm)	Gradations internes (H x L x P cm)	Dims externes (H x L x P cm)	Étagères / Position	Puissance	Poids (kg)	
Support de base	Convection naturelle			Circulation assistée par ventilateur					
	MINIS/6/TDIG/FR	6	15 x 23 x 19	46 x 35 x 33	N/A	N/A	1..1	350	16
	MINIS/18/TDIG/FR	18	26 x 26 x 27	55 x 38 x 41	N/A	N/A	1..1	500	21
	MINIS/30/TDIG/FR	30	24 x 36 x 35	51 x 48 x 49	24 x 36 x 31	51 x 48 x 63	2..2	750	30
	MINIS/40/TDIG/FR	40	32 x 36 x 35	54 x 48 x 49	32 x 36 x 31	54 x 48 x 63	2..3	750	35
	MINIS/50/TDIG/FR	53	33 x 49 x 33	66 x 63 x 47	33 x 49 x 29	66 x 63 x 61	2..3	750	45
	MINIS/75/TDIG/FR	73	33 x 49 x 45	66 x 63 x 60	33 x 49 x 41	66 x 63 x 74	2..3	1000	55
	MINIS/100/TDIG/FR	99	45 x 49 x 45	78 x 63 x 60	45 x 49 x 41	78 x 63 x 74	3..4	1000	60
	MINIS/125/TDIG/FR	121	55 x 49 x 45	88 x 63 x 60	55 x 49 x 41	88 x 63 x 74	3..5	1500	65
	MINIS/150/TDIG/FR	143	55 x 49 x 53	88 x 63 x 68	55 x 49 x 49	88 x 63 x 82	3..5	1500	70
MINIS/200/TDIG/FR	180	N/A	N/A	75 x 49 x 49	108 x 63 x 84	4..7	2000	80	
Montage latéral	DP/50/TDIG/FR	58	42 x 40 x 35	58 x 73 x 48	45 x 36 x 35	58 x 73 x 48	2..3	750	35
	DP/75/TDIG/FR	78	42 x 53 x 35	58 x 85 x 48	45 x 49 x 35	58 x 85 x 48	2..3	1000	45
	DP/100/TDIG/FR	102	42 x 53 x 46	58 x 85 x 59	45 x 49 x 40	58 x 85 x 59	3..4	1000	55
	DP/125/TDIG/FR	126	52 x 53 x 46	69 x 85 x 59	55 x 49 x 46	69 x 85 x 59	3..5	1500	65
	DP/150/TDIG/FR	149	52 x 53 x 54	69 x 85 x 67	55 x 49 x 54	69 x 85 x 67	3..5	1500	70
	DP/200/TDIG/FR	198	N/A	N/A	75 x 49 x 54	89 x 85 x 67	4..7	2000	90

*Remarque, la capacité interne utilisable est réduite avec la circulation assistée par ventilateur

Commande

Toutes les unités ont un intérieur CLAD avec une interface à écran tactile en standard. Lorsque des options sont requises, ajoutez simplement le code d'option à la référence d'origine. Par exemple **MINIS/50/TDIG/FR** avec convection forcée et chambre en acier inoxydable devient **MINIS/50/F/TDIG/FR/SS**. Contactez le service commercial pour des options sur mesure.

Codes d'option

F	Circulation assistée par ventilateur	SS	Chambre en acier inoxydable	AWA	Avertissement sonore
AP	Ports d'accès	TIM	Minuterie avancée à 3 étapes	10PRO	10 menu x 8 profil (inc cyclique)
SPC	Étalonnage en un seul point	3PC	Étalonnage en 3 points	TUS	Enquêtes sur l'uniformité de la temp
EXT	Systèmes d'extraction	X1	Garantie prolongée	STACK	Kits d'empilage